



Catálogo de Equipos Veterinarios | **AÑO 2024**

LABORATORIO · ECOGRAFÍA · CIRUGÍA · RADIOLOGÍA



Teléfono: (601) 762 4353
Ventas: 322 934 7826 - 300 811 5308
320 454 5726 - 310 432 3372 - 310 433 4097
www.equposmedicosveterinariosmb.com
Bogotá D.C. - Colombia



BC-20 VET

Analizador de Hematología 3 Partes

- CBC+3-DIFF, 21 parámetros+3 histogramas (*P-LCC y P-LCR solo para perros)
- Rendimiento: 30 muestras por hora
- Sistema de operación intuitivo con pantalla táctil TFT de 8,4 pulgadas
- Tamaño más compacto y mejor eficiencia energética Muestreo de vial abierto
- Almacenamiento de 100.000 resultados con histogramas
- Control de calidad, calibradores y reactivos originales.
- 21 parámetros: WBC, Gran#, Gran%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC*P-LCC y P-LCR solo para perros.

mindray
animal care



BC-5000 VET

Analizador de Hematología 5 Partes

Principios

Citometría de flujo (FCM), dispersión láser triangular, colorante químico método y canal basófilo independiente

Método avanzado de impedancia de CC para el recuento de RBC y PLT

Reactivo libre de cianuro para prueba de hemoglobina

Parámetros

23 parámetros: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT

3 histogramas para WBC, RBC y PLT

3 diagramas de dispersión para el diferencial WBC

Rendimiento: hasta 60 muestras por hora

Especies

Perro, Gato, Caballo, Mono, Rata, Ratón, Conejo, Cerdo, Panda, Ailurus, Vaca, Llama, Cabra, Oveja, Hurón y Camello

mindray
animal care



BC-60R VET

Analizador de hematología

Principios:

Citometría de flujo y método SF Cube* para contar WBC de 5 partes, RET Método de impedancia de fluido envolvente para contar RBC y PLT, Recuento óptico-PLT Reactivo libre de cianuro para prueba de hemoglobina*S: dispersión; F: fluorescencia; Cubo: análisis 3D

Especies animales:

Fase I: gato, perro y caballo; Fase II: rata, ratón, conejo, mono y cerdo; Fase III: vaca, hurón, cabra, oveja, camello, llama, panda, alpaca; 16 especies animales+50 especies animales autodefinidas, Parámetros (33): serie WBC: WBC, Neu(#,%), Mon(#,%), Lym(#,%), Eos(#,%), Bas(#,%) (11 elementos) Serie RBC: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV (8 artículos) Serie RET: RET(#,%), IRF, LFR, MFR, HFR, RHE (7 elementos) Serie PLT: PLT, PDW, MPV, P-LCR, P-LCC, PCT, IPF (7 artículos)

mindray
animal care





BIOBASE



SILVER PLUS

Analizador de química semi automático

Fácil operación con un botón.

- Punto final, cinético, tiempo fijo, tasa, etc.
- Longitud de onda del filtro: 340/405/450/510/546/578 / 630nm, 2 posiciones de filtro más abiertas, otras bajo pedido.
- Con 20 posiciones de incubación.
- Gran memoria para almacenar 144 programas de prueba y 5600 resultados de prueba.
- Excelente función de control de calidad, el gráfico de control de calidad se puede almacenar, mostrar e imprimir.
- 37 temperatura en celda de flujo e incubación.
- El gráfico en tiempo real se puede mostrar e imprimir.

VETUBE 30

Química portable

Parámetros:

TP, ALB, GLOB, ALB / GLOB, T-BIL, ALT, AST, AST / ALT, ALP, CK,
-AMY, BUN, CREA, BUN / CREA, CA, P, TC, GLU, LDH, K, Na, Cl, Na / K, CO2,
-GT, UA, D-BIL,
I-BIL, Mg

Especies: Gato, Perro, Conejo, Ratón, Mono, Ganado, Oveja, Cabra, Vaca, Caballo, Cerdo, Elefante, Camello

Impresora Impresora térmica / Imprime en PC mediante software

Sin calibración, algoritmo de calibración integrado

Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas

Peso 4.3Kg

Dimensión Largo: 27 cms x Ancho: 15.5 cm x Alto: 36 cm

Conexión: 2 puertos USB

mindray
animalcare



BS-240 VET

mindray
animalcare



Química automatizada

Bandeja: 80 posiciones de reactivos y 40 muestras posiciones en refrigerado (2~12) compartimiento

Volumen de reactivo: 10~250 µl, paso de 0,5 µl

Volumen de muestra: 2~45 µl, paso de 0,1 µl

Sonda: detección de nivel de líquido, colisión vertical protección, control de inventario

Limpieza de sonda: lavado automático de sonda interior y exterior

Remanente < 0.05%

Dilución de muestras: Predilución y postdilución automáticas

- Hasta 80 posiciones de muestra.
- Hasta 80 posiciones de reactivo. (40 fijos + 40 intercambiables).
- Volumen mínimo de reactivo: 100 µl.
- Sonda inteligente.
- Detección de nivel de líquido.
- Protección contra colisiones.
- Precalentamiento de reactivos.



BIOBASE



BK-200 MINI

Química automatizada

Una sonda para reactivos y muestra; Un mezclador; Sonda de lavado.

Bandeja de reacción: $37^{\circ}\text{C} \pm 0,1^{\circ}\text{C}$, monitor en tiempo real.

Bandeja de reactivos: Bandeja refrigerada con interruptor independiente.

Aguja de muestra: función de sensor de nivel de líquido. Función anticolisión Detección de volumen de reactivo en tiempo real.

Sonda de lavado: Sistema de lavado independiente de 2 pasos.

Rendimiento: 200 pruebas / hora.

Método de análisis: Punto final, tiempo fijo, tasa (cinética).

Posiciones de muestra: 37 posiciones de muestra.

Posición del reactivo: 28 posiciones de reactivo.

Volumen de la muestra: 2 ~ 70ul.

Volumen de reactivo: 20 ~ 350 ul.

UA-60 VET

Analizador de orina

RENDIMIENTO DE DETECCIÓN ALTAMENTE EFICIENTE: MÁS FIABLE

El analizador químico de orina automatizado de la serie UA utiliza tecnología de muestreo de matriz de puntos para evitar interferencias cruzadas y mejorar la precisión del análisis. Mientras tanto, el modo de detección física analiza automáticamente el color, la turbidez y la SG, para garantizar que todos los parámetros de la orina obtengan un análisis completo.

PARÁMETRO INVESTIGABLE: MÁS CIENTÍFICO

El analizador químico de orina automatizado de la serie UA proporciona un parámetro investigable Albúmina / Creatinina (A / C) para detectar la albúmina en orina.

Hallazgos de la investigación, el valor de A / C tiene relatividad con la albúmina en orina en 24 h, lo que proporciona un índice de diagnóstico rápido y simple para la proteinuria en la clínica.

mindray
animalcare



MICROSCOPIO

**Binocular profesional
Scientific**



REACTIVOS

**Kit para hematología
veterinaria 3 partes**



CENTRIFUGA

De 6 tubos Scientific



Labtest
Reactivos
100%
Veterinarios



DP-30 VET

Ecógrafo portátil

Confianza diagnóstica y aplicaciones clínicas variadas.

PW (Doppler Pulsado) y Auto Trace revelan detalles del flujo sanguíneo para un diagnóstico más completo.

Tissue Harmonic Imaging (THI) para una resolución de contraste mejorada. iClear para Speckle Reduction Imaging, que proporciona contornos claros y nítidos de las lesiones.

IP (Procesamiento de imagen) para optimización rápida de la imagen.

8 TGC asegurando un control de imagen preciso.

Amplia gama de transductores para obstetricia, ginecología, abdomen, urología, pequeñas partes, ortopedia y pediatría.

mindray
animal care



mindray
animal care



DP-50 VET

Ecógrafo portátil

Con configuraciones integrales y un diseño integrado, el NUEVO DP-50 Vet es el resultado de los esfuerzos continuos y decididos de Mindray para hacer que la atención médica veterinaria sea más eficiente, efectiva y accesible para todos. El DP-50 Vet, un sistema de ultrasonido en blanco y negro de primera calidad con función Doppler color opcional, ofrece más de lo que esperaba. Con una nueva forma inteligente y pantalla completa, movilidad mejorada y operaciones más convenientes, este sistema confiable y asequible mejorará las prácticas generales y es adecuado para múltiples necesidades clínicas veterinarias.

mindray
animal care



Z50 VET

Ecógrafo portátil

Modos de Escaneo Veterinario:

- B, Color, PW, Power, M

Principales Características:

- iClear Reducción del grano de la imagen.

- THI Segunda armónica.

- iTouch Optimización inteligente de la imagen.

- iBeam Composición espacial de imágenes.

- iStation Archivo revisión y búsqueda de datos.

- iZoom Imagen pantalla completa.

- PSHI Segunda armónica de fase invertida.

- iStorage™ Transferencia directamente de las imágenes y de los informes a la PC a través del cable de red, así como las mediciones efectuadas y la función de edición del formato de reporte.



Z60 VET

Ecógrafo portátil

Aplicaciones veterinarias integrales

Modos de escaneo veterinario: B, Color, PW, CW, Potencia, M, Free Xros M
Variedad de transductores veterinarios: Microconvexo, Lineal, Convexo, Arreglo por fases, Endocavidad

Aplicaciones veterinarias: órganos reproductivos, abdomen, cardíacos, tendinosos, partes pequeñas y más.

Paquetes de exámenes veterinarios: medición, comentario, informe y marca corporal diseñados para caninos, felinos, equinos, bovinos, ovinos y más.

Potentes soluciones cardiovasculares

Doppler PW / CW: traza y cálculo Doppler automático

Color M: incluye el modo Color Flow M y el modo Color Tissue M

IMT automático: medición automática del espesor veterinario de medios íntimos

Imágenes Doppler de tejidos: módulo de ECG completamente funcional (TVI, TEI, TVM, TVD) para análisis de cardiología veterinaria



VETUS 5

Ecógrafo estacionario

La serie Mindray Vetus ofrece la solución veterinaria profesional para una amplia variedad de especies que van desde pequeñas mascotas hasta grandes especies del campo. Sistema Doppler Color.

- Medición automática: Auto PW, Auto CW maximizan la productividad para un escaneo fácil y preciso
- Paquetes de aplicación dedicados: Abdomen / Cardiología / Reproducción / Piezas pequeñas
- Herramientas ingeniosas: fórmula veterinaria / biblioteca de comentarios / marca del cuerpo del animal / plantilla de informes
- Hasta cuatro transductores conectados al tiempo.

VETUS E7

Ecógrafo portátil

- Plataforma ZONE Sonography (ZST+)
- Monitor Principal: 15.6" LED Full HD, resolución de 1920px x 1080px
- Pantalla Touch: 12.3" anti reflejo, resolución de 1920px x 720px.
- Tercera pantalla: externa para visualización de información del equipo.
- THI and PSHB/M/Color/Color M/PW/Power/Directional
- Power Doppler Flow Imaging,
- iBeam (Spatial Compounding Imaging),
- iClear (Speckle Suppression Imaging),
- iTouch (Auto Image Optimization),
- iZoom (Vista a pantalla completa),
- HD Scope,
- Echo Boost,
- HDR Flow (High Dynamic Range Flow),
- HR Flow (High Resolution Flow),
- Internal WIFI*
- i-ScanHelper (Asistente inteligente en el escaneo)*,
- iScape View (Imagen panorámica en tiempo real)*,
- iNeedle (Mejora la visualización de la aguja)*,





VETUS 7

Ecógrafo estacionario

Flujo de trabajo fácil, con cambio rápido de transductores y modos de examen en la misma interfaz en 1 segundo. Con un solo clic cambiará a los modos de uso frecuente en la pantalla táctil.

Diseño de interfaz de usuario intuitivo, solo verá las opciones de menú asociadas e interconectadas para un procedimiento claro. El sistema de información animal dedicado admite la creación rápida de exámenes.

- Monitor LED de alta definición de 21,5", rotación de 180 grados
- Pantalla táctil antideslumbrante de 13,3", rotación de 30 grados, compatible con múltiples gestos
- Teclado deslizante con cubierta de silicona
- Cuenta con 4 enchufes de transductores



VETUS 8

Ecógrafo estacionario

- Herramientas de medición automática: Auto PW, Auto CW, Auto EF que ayudan a maximizar la productividad con un escaneo preciso con facilidad.
- Monitor LED de alta definición de 21,5", rotación de 180 grados. Pantalla táctil antideslumbrante de 13,3", rotación de 30 grados, compatible con múltiples gestos.
- Teclado deslizante con cubierta de silicona.
- 4 tomas de transductores inteligentes activos con diseño de bloqueo fácil.
- Batería de alta capacidad para el modo de espera, mantenga los datos de la imagen siempre seguros.

mindray
animal care



VETUS 9

Ecógrafo estacionario

Se presenta el sistema de ultrasonido premium: Vetus 9. Desarrollado por Tecnología ZONE Sonography™ (ZST), Vetus 9 trae el ultrasonido con rendimiento de imágenes para animales al siguiente nivel y proporciona excelentes soluciones en aplicaciones dedicadas con imagen líder calidad, excelentes herramientas de diagnóstico y un flujo de trabajo eficiente.

Diseño cuidadoso para una comodidad óptima

Pantalla completa sin marco de 23,8" con imágenes grandes para una experiencia inmersiva

Monitor de protección ocular con ajuste de brillo adaptativo

Pantalla táctil Full HD de 15,6" con interacción intuitiva

Cambio de acceso directo de los últimos transductores y exámenes usados

5 transductores con diseño elevado para una conexión cómoda

Diseño fácil de usar de 26dB para una experiencia operativa silenciosa

mindray
animal care





VETUS 50

Ecógrafo estacionario

Equipado con la plataforma de ultrasonido ZST+ de próxima generación de Mindray Animal Medical y la tecnología de transductor 3T con ComboWave, el Vetus 50 ofrece un rendimiento preciso para escanear diferentes animales.



Por otra parte, cuenta con las herramientas integrales de aprendizaje, que harán que el aprendizaje de los veterinarios sea más conveniente y eficiente.

Aplicaciones:

- Abdomen
- Cardiología
- Reproducción

Tipos de transductores:

- Transductor de matriz curva
- Transductor de matriz lineal
- Transductor de matriz en fase

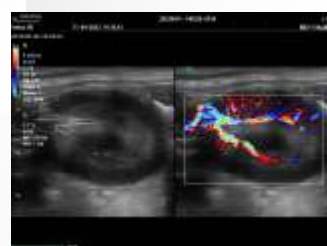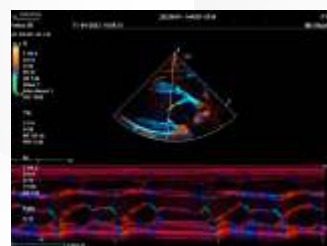



VETIX S300

Sistema de Radiografía

Basado en la observación y la investigación de la aplicación DR veterinaria, el sistema profesional de imágenes DR veterinarias Vetix S300 se lanza mediante la aplicación de tecnología DR líder en la industria, lo que permite en gran medida la aplicación clínica veterinaria del sistema de rayos X. Vetix S300 trae innovaciones en términos de alta calidad, experiencia profesional y fácil operación.

Proporciona funciones avanzadas como iShotHelper para guía de posicionamiento, iVocal para exposición controlada por voz. También tiene diseños personalizados para veterinarios y una operación simplificada, como iFast para encender/apagar con una sola tecla, iSolo para flujo de trabajo de un solo operador, aumenta drásticamente la eficiencia del trabajo.



VETIX P8

Sistema de Radiografía

- Equipo de RX con detector digital directo.
- Detector de Csl de 36 cm x 43 cm con pixel de 140 μ m.
- Pantalla táctil de 8".
- Rango de 40 KV a 125 KV.
- Rango de 3.2 mA a 160 mA.
- Foco fino 0.6 y foco grueso 2.8 mm.

Estación de trabajo DICOM/PACS que incluye:
CPU OptiPlex DELL (5080MT/4G RAM/1TB HDD/Win10/64bit) y monitor DELL HD (23.8"/LED/IPS).





CANIS 5A

Generador de Rayos X

- Diseño compacto y ligero para uso portátil
- Procesamiento y visualización de imágenes en tiempo real a través de una pantalla de 10"
- Interfaz inalámbrica 4G/WiFi para interconexión de datos de imagen, interoperabilidad y diagnóstico remoto en tiempo real
- Reconocimiento de AI de la posición de disparo para ayudar al médico en la lectura de películas y mejorar la precisión del diagnóstico
- Posicionamiento global GPS, con una precisión de 2,5 m en espacios abiertos
- Selección óptima de parámetros de exposición a rayos X basada en regiones anatómicas programadas para reducir errores y mejorar la eficiencia

HEART 5RC

Generador de Rayos X

Heart 5RC es un equipo de rayos X portátil todo en uno, una máquina que incluye una unidad de potencia de rayos X de 5 kW. De tamaño pequeño, peso ligero y alta densidad de potencia, que lo hacen ideal para una amplia variedad de aplicaciones en la clínica veterinaria.

- Pequeño y ligero, fácil uso y portable.
- Control de exposición inalámbrico.
- Exposición manual con cable.
- Operación flexible, imágenes rápidas.

Fuente eléctrica (V) CA 210 - 230 / CA 100 -120, Potencia (kilovatios) 5, Rango kV (KVp) 40 -125, Rango de mA (mAs) 0,1-100, Rango de mA (mA) 10 -100
Modo de comunicación RS232/Bluetooth, Modo de exposición Alámbrico/Inalámbrico, Puntos focales (mm) 0,6/1,8, Ángulo del ánodo (°) 15
- Peso 16 kg.



VENU 1717XV

Flat Panel

Características

- Detector de cassette inalámbrico según ISO 4090, cabe en bucky
- Estable iSync+ Detección automática de exposición (AED)
- Paso de píxeles de 139 μ m, con ADC de 16 bits para obtener más detalles de la imagen
- Batería de larga duración y flujo de trabajo inteligente
- Compatibilidad inalámbrica de doble banda (2,4 y 5 GHz) con facilidad para compartir
- Deposición directa CSI para una mejor calidad de imagen con menor dosis



MARS 1717V

Flat Panel Inalámbrico

Mars 1717V es un FPD inalámbrico inteligente con un casete de 17 x 17" para imágenes radiográficas. Cuenta con un software de fácil uso, rendimiento inalámbrico excepcional y una batería de larga duración. El Mars 1717V cuenta con un flujo de trabajo rápido y es la opción óptima para soluciones de obtención de imágenes con un generador Rayos X, bajo cualquier condición.

Características:

- Detector de cassette inalámbrico según ISO 4090, cabe en bucky
- Exposición automática iSync+ estable • Detección (DEA)
- Paso de píxeles de 139 µm, con ADC de 16 bits para obtener más detalles de la imagen
- Batería de larga duración y flujo de trabajo inteligente
- Compatibilidad inalámbrica de doble banda (2,4 y 5 GHz) con facilidad para compartir
- Deposición directa CSI para una mejor calidad de imagen con una dosis más baja

SonoScape



HD-350

Endoscopio

Vea más, logre más, obtenga más beneficios.

La innovación reescribe los estándares. Con eso en mente, SonoScape Medical le presenta el HD-350, una nueva alta definición sistema de endoscopia diseñado específicamente para la detección y el diagnóstico con una excelente amistad presupuesto.

Especificaciones procesador de video HD-350:

Salidas de video HD: DVI, VGA, SDI

Salidas de video estándar: S-VIDEO, CVBS

Grabación de video HD: la estación de trabajo incorporada, registra oportunamente el examen en optima calidad.

Zoom/PBP: sí/sí

Dimensiones:

(Largo x Profundidad x Ancho/Peso)

455mm x 370mm x 124mm/9.5Kg



mindray
animal care



VETINA Es3

Endoscopio

- Calidad HD
- Imágenes HD (CMOS)
- Imagen con poco ruido
- Alta reproducción cromática
- Unidad principal compatible con diferentes endoscopios flexibles
- Diseño portátil
- Pantalla de 10 pulgadas (1024×7680)
- Cómodo espacio operativo
- Conveniente para servicio móvil o en sitio
- Excelente desviación de hasta 210°Adecuado para la mayoría de los escenarios de examen
- Endoscopio duradero con un ángulo de flexión máximo de 210°
- Arco y orofaringe fáciles de explorar.



VETINA Cs7

Sistema de Radiografía

Imagen 4K UHDResolución 3840 × 2160; 4 veces la resolución de una imagen HD, con una textura más vívida para un reconocimiento preciso.

Amplia gama de coloresRepresenta órganos y tejidos en color real, perfecta identificación de vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y nervios.25-150 mm extendido.

- Monitor 4k de 31 o 55 pulgadas, según su elección.
- Captura de fotos y grabación de video UHD / FHD.
- Grabación sencilla con un solo clic.
- Profundidad de campo extendida * 25 ~ 150 mm.
- Evita la distorsión de la lente de manera efectiva.
- Adecuado para aplicaciones veterinarias.

mindray
animal care





VETA 3

Equipo de Anestesia

Estación de anestesia inhaladora compacta, con posibilidad de incorporar ventilación mecánica integrada de manera modular.

- Diseño integrado especial para clínicas veterinarias
- Solución de estación de trabajo muy flexible
- Circuito a paciente diseñado para veterinaria con un menor espacio muerto
- APL regulable para controlar la presión en vía aérea.
- Rotámetro de oxígeno con precisión a menos de 1L.
- Válvulas unidireccionales optimizadas para minimizar enredos
- Vaporizador libre de mantenimiento

mindray
animal care



VETA 5

Equipo de Anestesia

Máquina de anestesia veterinaria con ventilación manual y automática de última generación. La ventilación mecánica se implementa a través de una turbina que no requiere ningún gas de impulsión, por ejemplo, de un compresor.

Equipo: Veta 5 sobre soporte móvil, tubo de flujo para O2, Key-Fill de Isoflurano Vapor V60 (con manguera de llenado), ext. Salida de gas fresco para ventilación con mascarilla sin pasar por el sistema circular, recipiente absorbente reutilizable, soporte para filtro de gas anestésico (con escalas), manguera ZGV para O2 (longitud 3,0 m), ventilación automática con los modos de ventilación Soporte de volumen (VS) / Ventilación con control de volumen (VCV). Las opciones de ventilación SIMV y PCV están disponibles como opciones y también se pueden activar más tarde.

mindray
animal care



Vp3 VET

Bomba de Infusión

- Diseño compacto con mango
- Peso ligero de 1,45 kg para un transporte fácil
- Visualización del nombre del medicamento e historial médico
- Hasta 4 modos de infusión, que satisfacen una amplia gama de demandas clínicas
- Cumple con la norma EN-1789, que admite el uso en ambulancia

Mindray proporciona diferentes tipos de conjuntos de IV compatibles con nuestras bombas para cumplir con sus requerimientos a través de diferentes necesidades clínicas, y asegura un mejor rendimiento.

mindray
animal care





VETAL 3

Monitor multiparametros

Este monitor veterinario está diseñado para que sea económico con la configuración sencilla y el uso intuitivo. Los parámetros básicos de ECG, SpO2, NIBP, TEMP y RESP están integrados para satisfacer la mayoría de los requisitos clínicos y proporcionar una atención eficiente y de calidad.

- El diseño sencillo de los ojos de trabajo y el acceso a todas las funciones en dos pasos o menos permiten simplificar las complejidades.
- La pantalla LED de alta resolución de 10.1 pulgadas ofrece una visualización de alta calidad. El indicador de la alarma de presión en las vías respiratorias exclusivo ofrece una experiencia realista.
- El diseño ecológico sin ventilador reduce las posibilidades de que ingresen pelos de los animales en el interior del monitor, prolonga la vida útil y es eficaz en diferentes entornos.

mindray
animalcare



UMEC 10 VET

mindray
animalcare



Monitor para Cirugía

La nueva serie uMEC de monitores Mindray ayudan a simplificar el flujo de trabajo y proporcionan una interfaz de usuario intuitiva. Gracias a los 25 años de experiencia de Mindray en monitorización de pacientes los monitores cumplen con todas las necesidades otorgando mediciones precisas para respaldar las decisiones clínicas del médico.

- NIBP Algoritmo específico para las características del flujo sanguíneo animal para medir de forma rápida y precisa
- SpO2 Tecnologías avanzadas para interferencia y perfusión débil
- ECG El exclusivo algoritmo de ECG patentado y ECG Smart Lead garantizan una monitoreo estable.
- Sensor de temperatura Medición exacta con su sensor intrarectal le permite controlar hipotermia o cambios de temperatura en cirugía o consultorio.
- Línea pletórica Visualice fácilmente el flujo respiratorio del paciente en tiempo real para tranquilidad en cirugía.

UMEC12 VET

Monitor multiparametros

- NIBP Algoritmo específico para las características del flujo sanguíneo animal para medir de forma rápida y precisa.
- Tecnologías avanzadas de SpO2 para interferencias y perfusión débil.
- ECG El exclusivo algoritmo de ECG patentado y ECG Smart Lead garantizan una monitorización estable.
- CO2 de flujo lateral.
- El excelente diseño del desagüe separa el agua de manera efectiva para la ventilación espontánea y mecánica.
- Pantalla de 12.1 pulgadas.

mindray
animalcare





MONITOR

De Signos Vitales

El monitor de signos vitales portátil mas pequeño del mundo.

- Medición precisa en 0.05%, índice de perfusión baja.
- Proporciona el parámetro del PI (índice de perfusión 0.05% – 20%).
- Medición precisa en todo tipo de mediciones extremas como pacientes neonatales y de choque.
- El NBP adopta el algoritmo SAWAA (auto adaptativo-forma de onda-amplitud-ajuste) y el algoritmo SAFD (auto adaptativo-deflación rápida).
- Operación fácil con pantalla TFT a color de 3.5 pulgadas y un interruptor ID de hasta 100 usuarios.



AniFM I3 VET

Bomba de infusión

- Pantalla táctil capacitiva de 3,5 pulgadas, TFT en color.
- LCD, $\geq 320 \times 480$ píxeles
- Brillo 1-8 niveles, ajustable
- Pantalla Soporte de visualización de fuente grande (personalizada información: caudal, tasa de dosis, VTBI, tiempo restante, etc.); información del paciente, información de infusión, información de alarma, información sobre el estado del sistema.
- La bomba flotante de suspensión mantiene la precisión de la infusión en $\leq \pm 4,5\%$, lo que evita la disminución de la precisión causada por una infusión prolongada o por variaciones en las especificaciones.
- Transfusión de sangre certificada
- Optimización cuidadosa para reducir la lisis de los glóbulos rojos.

AniFM S3 VET

Bomba de Jeringa

- Pantalla táctil capacitiva de 3,5 pulgadas, TFT color.
- LCD, $\geq 320 \times 480$ píxeles
- Brillo 1-8 niveles, ajustable
- Pantalla Soporte de visualización de fuente grande, personalizada información: caudal, tasa de dosis, VTBI, tiempo restante, etc.; información del paciente, información de infusión, información de alarma, información de estado del sistema
- Carga de jeringa Bolus GUARD: evita bolos accidentales al paciente cuando se carga la jeringa.
- Freno automático
- Parada instantánea para eliminar la posibilidad de una administración accidental.
- Sistema de presión dinámica (DPS)
- Presentación clara de los datos en un cuadro de mandos para la prealarma de la presión de oclusión.





ELECTROBISTURÍ

Para Cirugía Veterinaria

El diseño intuitivo y la configuración fácil de usar del generador electro quirúrgico (diatermia) para su uso la sala de operaciones veterinaria, presenta funciones monopolares y bipolares para satisfacer todas las demandas de las cirugías con seguridad, flexibilidad, confiabilidad y conveniencia.



- Diseño ligero y compacto.
- Múltiples aplicaciones.
- Corte y coagulación monopolar y bipolar.
- Ideal para cirugía veterinaria.

AUTOCLAVE

Starclave de 12.5 Litros

- Ciclo de esterilización para ropa 18 PSI a 121 °C
- Ciclo de esterilización para instrumental 30 PSI a 134 °C
- Ciclo de secado para instrumental, ropa y accesorios
- Número de bandejas: 3
- Tiempo de pre-calentamiento: 15 Min
- Tiempo de esterilización: 20 Min





EQUIPOS MÉDICOS VETERINARIOS



BIOBASE

